


Аспираторы для верхних дыхательных путей

АТМОС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

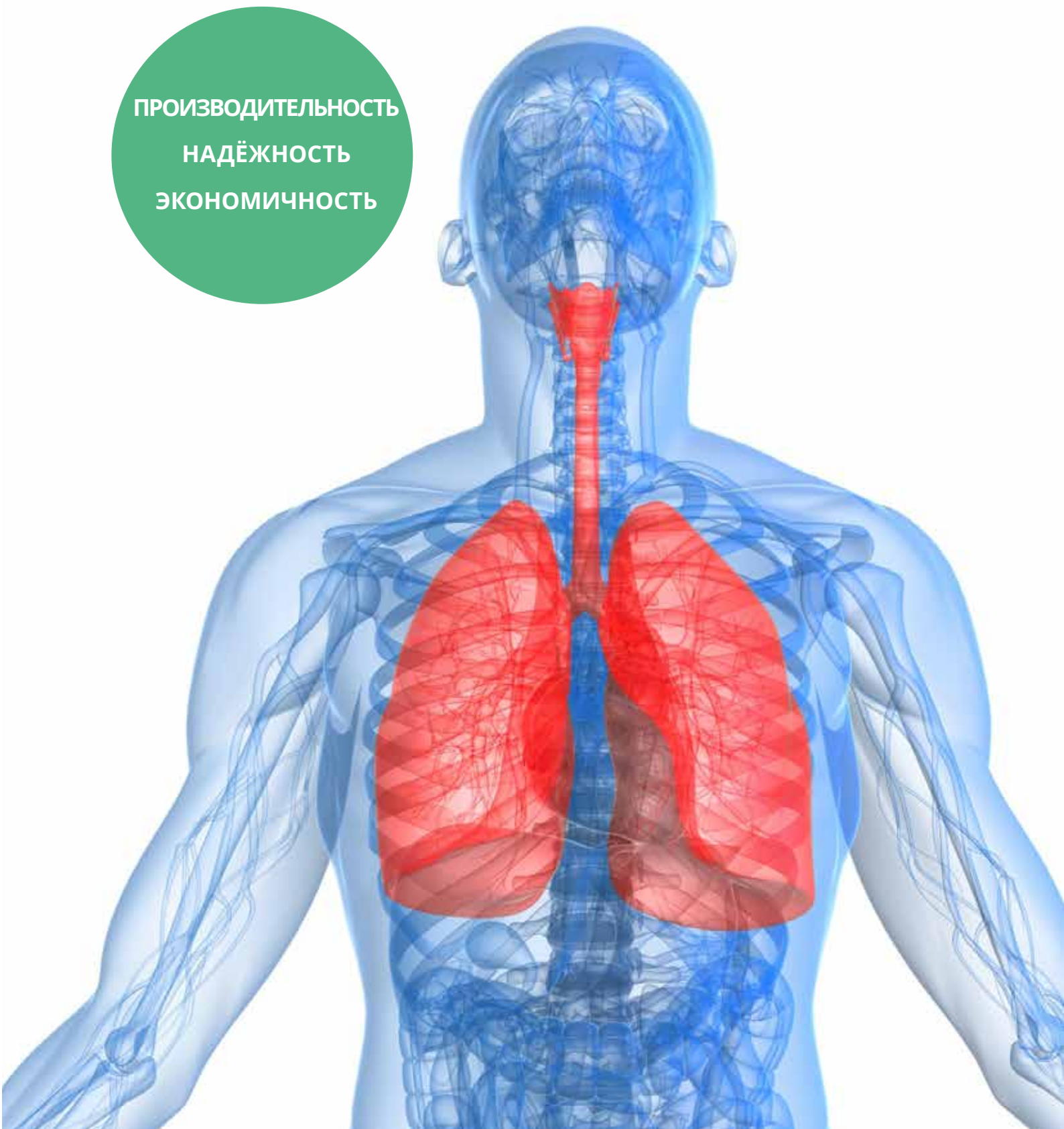

Почему именно аспираторы АТМОС?

Аспирационная санация верхних дыхательных путей – процедура, необходимая в тех случаях, когда у человека затруднена возможность откашливать секрет (слизь, мокроту и т.д.) или эта возможность вообще отсутствует. Подобное состояние возникает в связи с различными заболеваниями или после хирургических вмешательств в области верхних дыхательных путей. Аспираторы для санации верхних дыхательных путей АТМОС - надёжные спутники пациентов, которые из-за своих заболеваний вынуждены ежедневно проводить аспирацию верхних дыхательных путей.

Принцип аспирации заключается в том, что аспиратор создаёт вакуум. При этом газообразные, жидкие и твёрдые вещества/субстанции всасываются через шланг в специальную ёмкость прибора. Мощность аспиратора можно подобрать индивидуально для пациента. Частота проведения процедуры аспирации зависит от индивидуальных потребностей, согласно принципа „так часто, как необходимо, но как можно реже“.

Области применения

- Аспирация секрета после ларингоэктомии
- Аспирация секрета трахеотомии
- Аспирация секрета при заболеваниях с увеличением производства слюны
- Аспирация при некоторых повреждениях дыхательных путей после химиотерапии опухоли
- Аспирация при увеличении отделяемого секрета после некоторых операционных вмешательств
- Бронхиальная аспирация в педиатрии
- Аспирация при анестезии в операционной
- Аспирация секрета при длительной искусственной вентиляции лёгких в интенсивной реанимации
- Аспирация секрета при дисфагии после инсульта
- Гериатрическая гигиена полости рта

Виды аспирации

- Оральная аспирация:
аспиратором секрета через полость рта.
- Трансназальная аспирация:
аспиратором секрета через нос. Этот способ особенно рекомендован для аспирации секрета из области горла.
- Эндотрахеальная аспирация:
аспиратором секрета через воздушную трубку. Используются трубки или трахеоканюли.

Информационная брошюра

Подробную информацию и общие правила проведения аспирации Вы можете найти в информационной брошюре „Аспирационная санация верхних дыхательных путей“. Для получения бесплатной брошюры Вы можете обратиться к нам по телефону 8-800-707-08-94 или по электронной почте: atmosmed@atmosmed.ru

Также Вы можете найти брошюру в электронном виде на нашем сайте: www.atmos-med.ru



С - Класс

Наш аспиратор для санации верхних дыхательных путей для ваших потребностей!


- Синяя, прозрачная, сдвижная защитная панель для защиты панели управления от воздействия внешних воздействий и загрязнений
- Лёгкость и простота санитарной обработки поверхностей прибора
- Наличие точнейшего указателя вакуума и плавного регулятора вакуума
- Контрольное окно для визуальной проверки прибора на „перелив“, для быстрой и простой индикации неисправности прибора



Запатентованная система бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета ATMOS Direct-Docking-System

С внедрением системы „прямой стыковки“ Direct-Docking-Systems DDS в сегмент малых аспираторов, ATMOS представил новое поколение переносных аспираторов для санации верхних дыхательных путей. До определённого времени существовала опасность повреждения аспиратора при неправильном соединении ёмкости аспиратора шлангом с аспиратором, однако теперь эта проблема решена! С инновационной системой ATMOS ДДС - системой бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета - никаких проблем. Нет шлангов, нет проблем!

Благодаря неповторимым качествам аспираторов ATMOS® : системе „прямой стыковки“ DDS, эргономике, дизайну и привлекательной цене, ATMOS установил новый стандарт в аспирации верхних дыхательных путей.

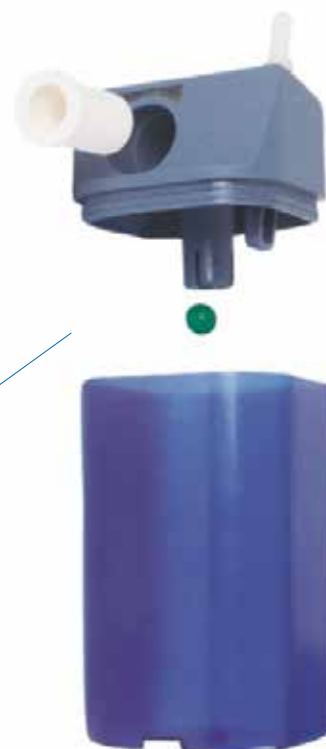

- Фильтр новейшей технологии
- Встроенная защита от переполнения
- Запатентованная система бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета Direct-Docking-System (DDS)



Переносные, независимые от электросети аспираторы АТМОС для верхних дыхательных путей



Аспиратор ATMOS Battery —
аккумуляторный, независимый от электросети:

- Мощность аспирации: 22 ± 2 л/мин
- Потребляемая мощность аккумулятора 12 В DC
продолжительность работы от аккумулятора около 40 мин
- Время зарядки 1,5 часа
- 5-ти уровневая LED-индикация заряда аккумулятора

Аспираторы ATMOS Aspirator —
работа от электросети

- Производительность 16 ± 2 л/мин или 26 ± 2 л/мин



Обзор моделей аспираторов

| | АТМОС С 161 Aspirator | АТМОС С 261 Aspirator | АТМОС С 161 Battery |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Артикул | 313.0000.0 | 313.0100.0 | 313.0400.0 |

Очистка и уход за аспираторами



Общие указания

- Аспиратор одновременно может использоваться только одним пациентом, так как нужно принимать во внимание высокую степень вероятности передачи микробов и возбудителей болезней.
- Проводите ежедневный визуальный контроль прибора.
- Применяйте аспиратор только согласно указаниям по применению.
- Используйте для дезинфекции прибора и комплектующих только рекомендованные ATMOS средства.
- Перед каждым процессом очистки необходимо обесточить прибор (выключить из розетки).



Ёмкость для секрета и крышка ёмкости для секрета

Ёмкость для секрета необходимо опустошать после каждого применения. Прополосните ёмкость и крышку под проточной водой со стандартным средством для мытья посуды. В случае застревания каких-либо остатков, удалите их щёткой. ATMOS рекомендует ежедневную дезинфекцию!



Корпус

Корпус прибора необходимо протирать чистым и влажным платком после каждого применения. Мы рекомендуем дезинфекцию корпуса по меньшей мере один раз в неделю.



Антибактериальный фильтр

Этот фильтр предотвращает проникновение бактерий и жидкостей внутрь прибора. Обращайте внимание, чтобы для прибора использовались только оригинальные антибактериальные фильтры ATMOS. В таком случае, смена фильтра понадобится по меньшей мере один раз в неделю. Фильтр необходимо немедленно заменить в трёх случаях: при передаче прибора другому пациенту, при промокании фильтра и его загрязнении.



Шланг аспиратора

Прополаскивайте шланг аспиратора с рекомендованным ATMOS дезинфицирующим раствором по меньшей мере один раз в день. Также прополаскивание проточной водой требуется после каждого применения прибора. Если следовать этим рекомендациям, то аспираторы ATMOS прослужат безупречно в течение многих лет в качестве надежных и гигиеничных вспомогательных средств в амбулаторном, стационарном и домашнем уходе. Замену шлангов ATMOS рекомендует производить примерно через 4 недели, так как они изнашиваются при частом применении и со временем становятся пористыми.

Аспираторы, работающие от электросети

| ATMOS C 261 Aspirator / DDS | Артикул |
|--|------------|
| <p>Переносной аспиратор, производительность: 26 ± 2 л/мин Плавный регулятор и прецизионный указатель уровня вакуума, градуированная ёмкость для секрета 1 л, крышка ёмкости с тройной защитой от переполнения, которая обеспечивается благодаря новейшей технологии фильтра, встроенной защите от переполнения и системе DDS. Контрольное окно для визуальной проверки прибора на перелив“.</p> <p>1 Комплект поставки: шланг аспиратора, силикон, \varnothing 6 мм, L = 1,3 м, сетевой кабель, 3 шт. антибактериальный фильтр, соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем), DDS-ёмкость для секрета, 1 л, DDS-крышка ёмкости, инструкция пользователя.</p> | 313.0100.0 |
| ATMOS C 161 Aspirator / DDS | |
| <p>Переносной аспиратор, производительность: 16 ± 2 л/мин Описание см. выше.</p> <p>2 Комплект поставки: шланг аспиратора, силикон, \varnothing 6 мм, L = 1,3 м, сетевой кабель, 3 шт. антибактериальный фильтр, соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем), DDS-ёмкость для секрета, 1 л, DDS-крышка ёмкости, инструкция пользователя.</p> | 313.0000.0 |

Аккумуляторный аспиратор

| ATMOS C 161 Battery / DDS | Артикул |
|--|------------|
| <p>Переносной аспиратор, производительность: 22 ± 2 л/мин Плавный регулятор вакуума и прецизионный указатель уровня вакуума, 5-ти-уровневая LED-индикация заряда аккумулятора, продолжительность работы от аккумуляторов около 40 мин, время зарядки 1,5 часа, градуированная ёмкость для секрета 1 л, крышка ёмкости с тройной защитой от переполнения, которая обеспечивается благодаря новейшей технологии фильтра, встроенной защите от переполнения и системе DDS контрольное окно для визуальной проверки прибора на „перелив“.</p> <p>3 Комплект поставки: шланг аспиратора, силикон, \varnothing 6 мм, L=1,30 м, сетевой кабель, энергоснабжение электросети 100 - 240 В, 50/60 Гц, соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем); 3 шт. антибактериальный фильтр, DDS-ёмкость для секрета, 1 л, инструкция пользователя.</p> | 313.0400.0 |



1 | Артикул 313.0100.0



2 | Артикул 313.0000.0



3 | Артикул 313.0400.0

Принадлежности

| Принадлежности | Артикул |
|---|------------|
| 1 Градуированная DDS-ёмкость для секрета, 1 л, синяя, полисульфон | 313.0015.0 |
| 2 Градуированная DDS-ёмкость для секрета, 1 л, прозрачная, полисульфон | 313.0017.0 |
| 3 Крышка ёмкости для секрета DDS, синяя, (включая запасной DDS-фильтр 1 шт.) | 313.0006.0 |
| 4 Соединитель шланга Ø 6 мм | 000.0836.0 |
| 5 Устройство для наматывания шланга аспиратора | 313.0007.0 |
| 6 Зарядное устройство для ATMOS Battery, 100 - 240 В~, 50/ 60 Гц | 313.0080.0 |
| 7 Сумка для переноски прибора, с удобными карманами для хранения расходных материалов. Цвет: чёрный. | 313.0011.0 |
| 8 Kfz-кабель для ATMOS C 161 Battery, подключение 12 В- | 313.0436.0 |
| 9 Держатель аспиратора с поворачивающимся универсальным креплением для навешивания прибора на стандартный рельс, штатив, кровать пациента, инвалидные коляски и т. д. | 313.0012.0 |
| 10 Тележка для прибора на 4-х роликах, для самостоятельного монтажа Габариты (В x Ш x Г): 580 x 425 x 400 мм. Цвет: серо-голубой | 320.0070.2 |
| Общие принадлежности | Артикул |
| 11 Короб для гибких катеторов, крепится на тележку, L=340 мм | 444.0140.0 |



1 | Артикул 313.0015.0



2 | Артикул 313.0017.0



3 | Артикул 313.0006.0



4 | Артикул 000.0836.0



5 | Артикул 313.0007.0



6 | Артикул 313.0080.0



7 | Артикул 313.0011.0



8 | Артикул 313.0436.0



9 | Артикул 313.0012.0



10 | Артикул 320.0070.2



11 | Артикул 444.0140.0

Расходные материалы

| Расходные материалы | Артикул |
|--|------------|
| <p>1 DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый.</p> <p>Замена после каждого пациента. При использовании одним пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном загрязнении или при смене пациента заменить немедленно. Упаковка 10 штук.</p> | 340.0054.0 |
| <p>2 Набор расходных материалов для аспираторов ATMOS C 161 / C 261:</p> <p>шланг аспиратора Ø 6 мм, L = 1,3 м, силикон; 3 x антибактериальный фильтр, 10 x соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем)</p> | 313.0160.0 |
| <p>3 Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, минимальная поставка 5 м. Обработка при температуре до 200 °C</p> | 006.0009.0 |
| <p>4 Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 1,30 м, 1 штука в упаковке, обработка при температуре до 200 °C</p> | 000.0013.0 |
| <p>5 Соединитель для шланга (регулировка вакуума пальцем), стерильный, неавтоклавируемый, замена после каждого пациента; при использовании одним пациентом замена каждые 2-3 дня. Минимальная поставка 10 штук.</p> | 000.0347.0 |



1 Артикул 340.0054.0



2 Артикул 313.0160.0



3 Артикул 006.0009.0



4 Артикул 000.0013.0



5 Артикул 000.0347.0